

İnhalasyon kılavuzu





Novolizer®

Başarılı bir inhalasyon için 3 yönlü kontrol

Kartuşun takılması/değiştirilmesi

1. Kartuşu ambalajından çıkarınız.
2. Novolizer®'in kapağındaki tırtıklı yüzeylere hafifçe bastırıp sıkarak kapağı öne doğru çekiniz.
3. Renkli dozaj düğmesine basmadan kartuşu yuvasına yerleştiriniz.
4. Kapağı tekrar Novolizer®'in üzerine takınız.

Lütfen Novolizer®'in 20'li veya 10'lu basamaklarla geriye doğru saydığını dikkate alınız.

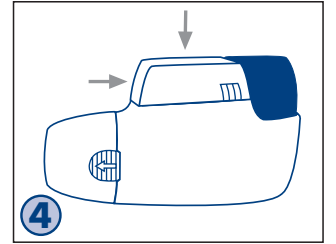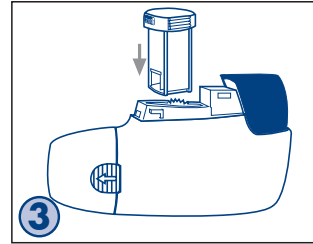
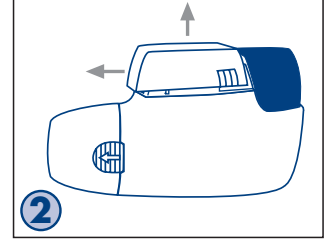
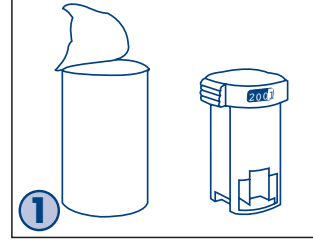


Novolizer® ile inhalasyon yapılması

1. Ağızlığın üzerindeki koruyucu kapağı çıkarınız.
2. Renkli dozaj düğmesini kuvvetlice sonuna kadar bastırıp tekrar bırakınız.
3. Kontrol penceresinin rengi kırmızıdan [red square] yeşile [green square] dönüşecektir. Önce derin bir biçimde soluk veriniz ardından ağızınızla ağızlığı kavrayarak kısa ve güçlü bir soluk alınız.

İnhalasyonu doğru yapıp yapmadığınızı 3 şekilde kontrol edebilirsiniz:

- Görerek - kontrol penceresinin rengi kırmızıya dönecektir.
- Duyarak - bir „klick“ sesi duyacaksınız.
- Tadarak - tatlımsı bir tat alacaksınız.

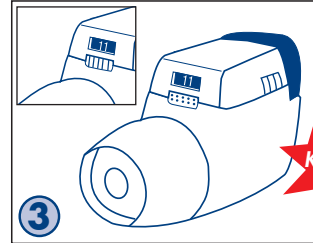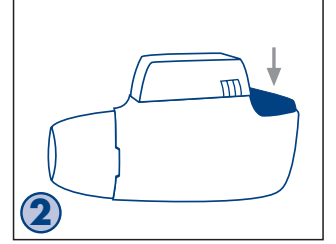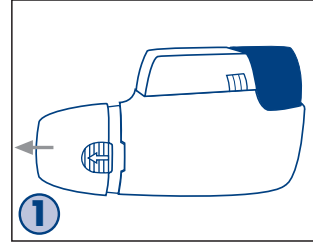

Novolizer® 'in temizlenmesi

Novolizer®'in içine soluk verilmesi durumunda aracın içine toz girebilir. Her kartuş değiştirilmesinde ağızlığın, dozaj sürgüsünün ve gövdenin kuru, yumuşak ve lif bırakmayan bir bezle kuru olarak temizlenmesi gerekir. Ayrıca dozaj sürgüsünü dikkatlice bir yere vurarak kalıntıların dökülmesi sağlanmalıdır.

1. Koruyucu kapağı çıkarınız ve Novolizer® başaşağı gelecek şekilde ters çeviriniz. Ağızlığı saat yönünün tersine doğru çeviriniz ve öne doğru çekerek çıkarınız.
2. Dozaj sürgüsünü hafifçe yukarı doğru bastırarak çıkarınız.
3. Dozaj sürgüsünü temizledikten sonra yukardan eğik durumda yaklaştırarak takınız ve yerine oturtunuz.
4. Ağızlığı, pimi girinti yerine oturacak şekilde yerleştiriniz ve yerine oturuncaya kadar saat yönünde çeviriniz. Koruyucu kapağı tekrar takınız.

